

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Ago/19
	Instrução de Uso	IUKCC2-H rev. 00

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Kit Cirúrgico

Nome Comercial: Kit Cirúrgico para Cesárea II Halyard

Modelo

77455: Kit Cirúrgico para Cesárea II Halyard

Especificações

<u>Componentes</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Quantidade</u>
Cobertura de Mesa	152 cm x 191 cm	1
Toalha Absorvente	38 cm x 56 cm	2
Manta do Bebê	80 cm x 130 cm	1
Campo Cirúrgico para Cesárea com Bolsa Coletora de Fluídos Acoplada	254 cm x 183 cm x 305 cm	1

Registro Anvisa: 81832580023

Reprocessamento Proibido.


Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem unitária de Papel Grau Cirúrgico ou Tyvek*.

Produto estéril - Óxido de Etileno. Não reesterilizar.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Ago/19
	<h2>Instrução de Uso</h2>	

Fotos

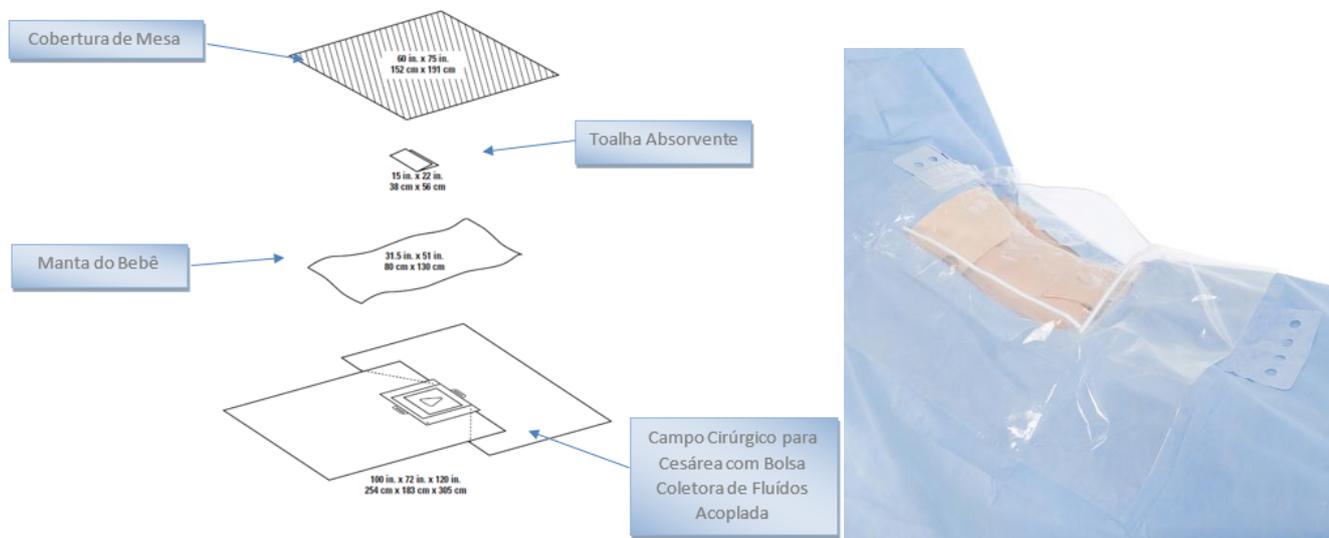

Conteúdo

Cada unidade contém: 01 Cobertura de Mesa, 02 Toalhas Absorventes, 01 Manta do Bebê e 01 Campo Cirúrgico para Cesárea com Bolsa Coletora de Fluidos Acoplada.

Cada kit é embalado individualmente em embalagem de Filme Plástico e Papel Grau Cirúrgico ou Filme Plástico e Tyvek*. As embalagens são armazenadas em uma bolsa de polietileno contendo 08 unidades. E então, são acondicionados em caixa papelão para transporte.

Descrição e Indicação

Os pacotes cirúrgicos são divididos em grupos que dependem da especialidade cirúrgica e dos requisitos do procedimento cirúrgico.

Os Campos Cirúrgicos são usados em hospitais nas salas de cirurgia. Especificamente, os campos cirúrgicos são usados para cobrir os pacientes, proporcionando uma barreira estéril entre o paciente e o médico durante procedimentos cirúrgicos. Em alguns produtos, os campos também fornecem absorção de fluidos, controle de instrumentos e linha e capacidade de coleta de fluidos.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Ago/19
	Instrução de Uso	IUKCC2-H rev. 00

Instruções de Uso

- Remova o pacote cirúrgico da embalagem com técnica asséptica, liberando o campo sobre a mesa auxiliar estéril.
- Desdobre o pacote cirúrgico com cuidado e de forma asséptica na mesa auxiliar e utilize os produtos na ordem em que estão dispostos.
- Todos os componentes do kit devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Composição

Cobertura de Mesa: Filme de Polietileno Laminado com Spunbond (Polipropileno)

Manta do Bebê: Não tecido Spunbond (Polipropileno)

Toalha absorvente: Polpa de Celulose e Polímero (Polipropileno)

Campo Cirúrgico para Cesárea com bolsa coletora de fluídos acoplada: Não Tecido SMS (Polipropileno) + Filme Plástico de Polietileno

Não contém látex.

Não contém DEHP.

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições de Manipulação

Todos os componentes do kit devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Advertências

Proibido Reprocessar.

Precauções

Descartar após o uso.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Ago/19
	Instrução de Uso	IUKCC2-H rev. 00

Não utilize se a embalagem estiver violada ou danificada.

Contraindicações:

Não aplicável.

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Morgana Borges de Araújo – CRF-SP: 74338

Fabricante Responsável: Halyard Health, Inc

5405 Windward Parkway - Alpharetta, Georgia – 30004 – Estados Unidos da América