

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Mar/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUKCUB1-H rev. 01

### Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Kit Cirúrgico

Nome Comercial: Kit Cirúrgico Universal - BASICS\* I Halyard

### Modelo

88878: Kit Cirúrgico Universal - BASICS\* I Halyard

### Especificações

<u>Componentes</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Quantidade</u>
Cobertura de Mesa com Zona Reforçada	112 cm x 229 cm	1
Campo Inferior	193 cm x 193 cm	1
Campo Lateral	112 cm x 193 cm	2
Campo Superior	275 cm x 127 cm	1
Cobertura Mesa Mayo	58 cm x 137 cm	1

Registro Anvisa: 81832580010

Reprocessamento Proibido.


Prazo de Validade: 05 anos

Embalagem unitária de Papel Grau Cirúrgico ou Tyvek\*.

Produto estéril - Óxido de Etileno. Não reesterilizar.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Mar/20
	<h1>Instrução de Uso</h1>	

## Fotos

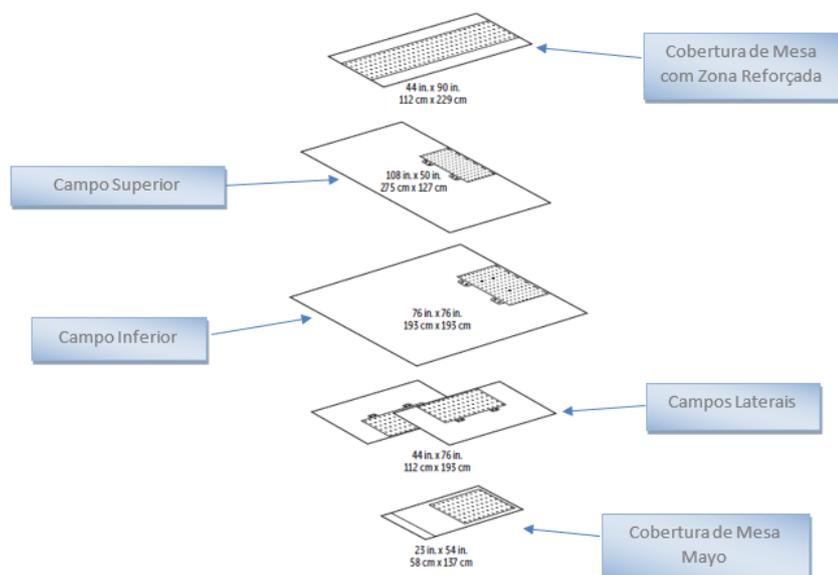

## Conteúdo

Cada unidade contém: 01 Cobertura de Mesa com Zona Reforçada, 01 Campo Inferior, 02 Campos Laterais, 01 Campo Superior, 01 Cobertura Mesa Mayo.

Cada kit é embalado individualmente em embalagem de Filme Plástico e Papel Grau Cirúrgico ou Filme Plástico e Tyvek\*. As embalagens são armazenadas em uma bolsa de polietileno contendo 05 unidades. E então, são acondicionados em caixa papelão para transporte.

## Descrição e Indicação

Os pacotes cirúrgicos são divididos em grupos que dependem da especialidade cirúrgica e dos requisitos do procedimento cirúrgico.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Mar/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUKCUB1-H rev. 01

Os Kit's Cirúrgicos são usados em hospitais nas salas de cirurgia. Especificamente, os kit's cirúrgicos são usados para cobrir os pacientes, proporcionando uma barreira estéril entre o paciente e o médico durante procedimentos cirúrgicos. Em alguns produtos, os campos também fornecem absorção de fluidos, controle de instrumentos e linha e capacidade de coleta de fluidos.

### **Instruções de Uso**

- Remova o pacote cirúrgico da embalagem com técnica asséptica, liberando o campo sobre a mesa auxiliar estéril.
- Desdobre o pacote cirúrgico com cuidado e de forma asséptica na mesa auxiliar e utilize os produtos na ordem em que estão dispostos.
- Os aventais devem ser desdobrados com cuidado. Os profissionais da sala de cirurgia deverão vesti-lo com cuidado, pois se trata de material estéril.
- Todos os componentes do kit devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

### **Composição**

Cobertura de Mesa: Filme de Polietileno Laminado com Spunbond (Polipropileno)

Campos: SMS com área de reforço (Polietileno e Polipropileno)

Cobertura Mesa Mayo: Filme de Polietileno com área de absorção com reforço em Spunbond (Polipropileno)

Não contém látex.

### **Condições de Armazenamento**

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

### **Condições para o Transporte**

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

### **Condições de Manipulação**

Todos os componentes do kit devem ser descartados após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Mar/20
	<b>Instrução de Uso</b>	IUKCUB1-H rev. 01

### **Advertências**

Proibido Reprocessar.

### **Precauções**

Descartar após o uso.

Não utilize se a embalagem estiver violada ou danificada.

### **Contraindicações:**

Não aplicável.

**Registrado por:** CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

**Distribuidor:** CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – [sac@cnph.com.br](mailto:sac@cnph.com.br)

Responsável Técnico: Morgana Borges de Araújo – CRF-SP: 74338

**Fabricante Responsável:** O&M Halyard, Inc

9120 Lockwood Blvd - Mechanicsville, Virgínia - USA 23116